


VALISETTE **MEDI**

VALISETTE BLINDÉE DE TRANSPORT POUR SERINGUES DE RADIOPHARMACEUTIQUES

TOUTES ÉNERGIES

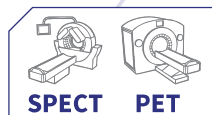

PRODUITS ASSOCIÉS

- Protège-seringues Mediclic
- Protège-seringues Easyview
- Protège-seringues Easysqueeze
- Chariot Manubox
- Chariot de transport combiné



La valisette Medi est l'accessoire de **transport de dose** indispensable pour tous les services de médecine nucléaire et est adaptée à tout type et modèle de seringue de 1 à 10 mL. Grâce à ses **deux épaisseurs de blindage**, 3 mm et 10 mm de plomb, elle s'adapte aussi bien aux activités SPECT que PET, pour apporter à l'utilisateur une diminution d'exposition aux extrémités mais également corps entier lors des transports de doses radioactives jusqu'aux salles et box d'injection. Elle permet l'acheminement en toute sécurité des seringues patient marquées avec les radioéléments tels que ^{99m}Tc , ^{111}In , ^{201}Tl , ^{177}Lu mais également ^{18}F , ^{68}Ga , ^{13}N par exemple. Sa poignée cylindrique permet à l'utilisateur une **préhension** et un **usage ergonomiques** au quotidien.

La valisette est fournie avec une mini tôle ondulée amovible en inox ajustée aux dimensions intérieures de la valisette qui permet

de stabiliser les seringues transportées sur toute la longueur du parcours quel que soit le modèle et la marque du protège-seringue utilisé. Ainsi, aucun mouvement n'est permis, ni aucune contamination possible lors du déplacement.


Imaginée par Medisystem pour être intemporelle, cette valisette **ultra robuste** est entièrement constituée d'inox dans sa structure extérieure et intérieure, et permet, de par sa conception étanche, un **nettoyage** ainsi qu'une **décontamination faciles**.

Une innovation complémentaire vient s'ajouter à cet accessoire avec une **option verrouillage** pour une sécurisation parfaite. Ainsi le stockage temporaire de doses radioactives est contrôlé et sécurisé.


La valisette Medi répond aux plus **hauts standards réglementaires** et est conforme à la vente pour le **marché américain**.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS UTILES (mm)

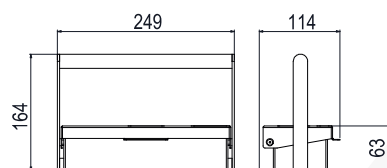

Modèle Basse & Moyenne Énergie

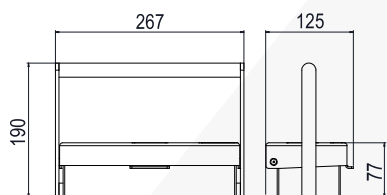

Modèle Haute Énergie

Générales	Valisette Medi BME	Valisette Medi HE
Dim. extérieures :	L 249 x P 114 x H 63 mm	L 267 x P 125 x H 77 mm
Hauteur totale avec poignée :	164 mm	190 mm
Dim. intérieures :	L 215 x P 60 x H 46 mm	
Radioprotection :	3 mm de plomb + 1 mm d'inox (intérieur et extérieur)	10 mm de plomb + 1 mm d'inox (intérieur et extérieur)
Éléments constitutants :	Structure en inox Tôle ondulée en inox L 213 x P 57 x H 1 mm	
Poids :	4,0 kg	12,2 kg
Colisage		
Dim. colis :	L 320 x P 250 x H 180 mm	L 300 x P 150 x H 250 mm
Poids colis :	4,8 kg	16 kg
Réf :	00034037	00034036